

381™

Baby Crib

Кровать для новорожденных



Кровать для новорожденных 381



Каркасы кроватей для новорожденных могут быть горизонтально вставлены один в другой для экономной транспортировки и хранения.


Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления. Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное. ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ.

- удобство транспортировки
- прочная надежная конструкция
- легкость очистки
- компактность

Кровать для новорожденных 381 – прекрасно сконструированное изделие для ухода за новорожденными. Удобный и эргономичный дизайн и габариты кровати создают матери и медицинскому персоналу идеальные условия для ухода за новорожденными. Благодаря большим колесам кровать легко перемещается. Для ее фиксации на поверхности два колеса снабжены тормозами. Удачно расположенный кювез позволяет располагать кровать над палатной кроватью матери, что значительно облегчает доступ матери к ребенку. При этом нижняя часть каркаса располагается под материнской кроватью, высвобождая окружающее пространство.

- Каркас из хромированной трубы
- Кювез выполнен из прозрачного акрила, легко поддается очистке, матрасное основание перфорировано, в одном торце имеется карман для именной таблички
- Регулировки Тренделенбург/Антитренделенбург бесступенчато
- Колеса Ø 100 мм, колеса ножного конца снабжены тормозами
- Максимально допустимая нагрузка – 12 кг

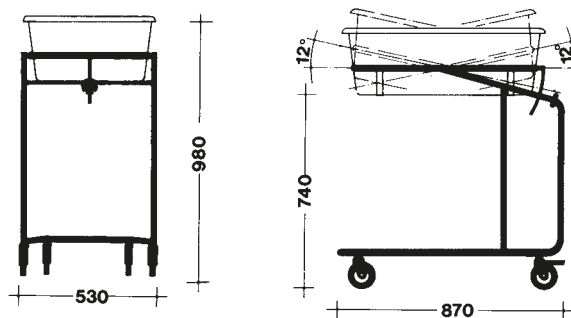

Кровать для новорожденных 381 спроектирована, изготовлена и ее документы оформлены в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и со стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.



Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com, www.merivaara.ru

